

GEBRAUCHSANWEISUNG

TRINKWASSERANALYSE LEICHT- UND SCHWERMETALLE



BITTE BEACHTEN SIE GENAU DIE GEBRAUCHS- ANWEISUNG

Ergebnisse können sonst verfälscht dargestellt werden und bieten somit keine Garantie für eine genaue Analytik.

Schritt 1:

WICHTIGE HINWEISE

- Bitte entnehmen Sie die Probenröhrchen der Verpackung und legen Sie diese für die Probenentnahme bereit.
- Denken Sie daran, den Probenbegleitschein vollständig auszufüllen (Name, Adresse, Geburtsdatum und Datum der Probenentnahme sowie Entnahmeort).
- Die Untersuchung des Wassers sollte an einem Zapfhahn Ihrer Wohnung erfolgen, an welchem Sie normalerweise das Trinkwasser für Lebensmittelzwecke entnehmen, z. B. in der Küche.
- **Das Testkit ist nur zur Messung eines Zapfhahnes ausgelegt!**
- Die durchgeführten Analysemethoden und Grenzwerte sind **ausschließlich auf die Untersuchung von Trinkwasser ausgelegt**. Die Auswertung von stark verunreinigtem Wasser (trüb, verfärbt, ungelöste Partikel), z. B. aus Teichen, ist nicht möglich!
- Zur Abnahme wird ein Messbecher mit einem Mindestvolumen von einem Liter benötigt.
- **Die besten Ergebnisse erhält man, wenn man das Wasser 4 Stunden in der Leitung stehen lässt. Alle anderen Wasserhähne können weiter genutzt werden.**

Schritt 2: **VORBEREITUNG**

Prüfen Sie das Testset auf Vollständigkeit.

Sollten Komponenten aus dem Testset fehlen, melden Sie sich gerne bei uns. Wir werden Ihnen umgehend Ersatzmaterial zukommen lassen. Dies gilt natürlich auch für beschädigte Ware.

Schritt 3: **DURCHFÜHRUNG**

Die Anleitung zur Durchführung dieses Tests finden Sie im Innenteil dieses Dokuments.

Schritt 4: **PROBENVERSAND**

Bitte werfen Sie die Probe bei mehr als 25°C und kälter als 4°C nicht in den Briefkasten, sondern geben Sie die Probe in der Postfiliale ab.

Der Versand sollte von Montag bis Donnerstag, nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen. Aus Österreich sollte der Versand Montag bis Mittwoch, nicht vor Feiertagen erfolgen. Bringen Sie die Proben noch am Tag der Probenahme zur Post.

Inhalt

1 Probenbegleitschein



1 Probenröhrchen



1 Versandtasche



Schritt 3:

DURCHFÜHRUNG

Nachdem Sie alle „wichtigen Hinweise“ aus Schritt 1 sorgfältig gelesen haben, können Sie mit der Probennahme beginnen. **Befolgen Sie die folgenden Schritte bitte streng nach Anleitung.** Nur so kann ein korrektes Messergebnis gewährleistet werden.

01

Drehen Sie den Wasserhahn komplett auf „kalt“ und stellen Sie den Wasserstrahl etwa bleistift dick ein.

Halten Sie einen Finger in den Wasserstrahl und lassen Sie das kalte Wasser so lange laufen, bis eine spürbare Abkühlung eintritt. Ab diesem Moment ist das in der Hausleitung verbliebene Stagnationswasser vollständig durch frisches Wasser aus dem Versorgungsnetz ersetzt.



02

Schließen Sie den Hahn und nutzen Sie diesen nach Möglichkeit 4 Stunden lang nicht. Andere Wasserhähne können weiter genutzt werden.



03


Nach der Stagnationszeit öffnen Sie den Deckel des Probenröhrchens und befüllen dieses direkt (ohne Vorlauf) bis zum Gewinde.

Achten Sie darauf, mit dem Probenröhrchen nicht den Wasserhahn zu berühren!




04

Schrauben Sie anschließend den Deckel fest auf das Probenröhrchen, so dass kein Wasser auslaufen kann.

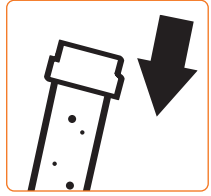

05

Nehmen Sie nun ein Bar-code-Etikett vom Probenbegleitschein und kleben Sie dieses auf das Probenröhrchen.

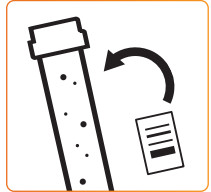

Schritt 4:

PROBENVERSAND

Damit wir Ihre Analyse durchführen können, müssen Sie Ihren Test zunächst aktivieren.

- 01** Im unteren Bereich des **Probenbegleitscheins** befindet sich ein Kundenabschnitt mit dem benötigten QR-Code. Scannen Sie den Code, um direkt auf die Eingabemaske des Kundenportals zu gelangen. Hier aktivieren Sie Ihren Test mittels Eingabe Ihrer persönlichen Daten. Haben Sie alle Felder vollständig ausgefüllt, bestätigen Sie die Testaktivierung mit „Daten senden“. Trennen Sie nun den **Kundenabschnitt** ab und bewahren diesen sorgfältig auf. Mit der darauf abgebildeten Seriennummer sowie Ihrem persönlichen Code können Sie nach der Probenauswertung Ihren Befund online abrufen.

- 02** Zum Versand geben Sie das **Versandgefäß mit dem Probenbegleitschein*** in die beiliegende Versandtasche. Wenn alle Materialien in die Versandtasche gegeben sind, ziehen Sie den Schutzstreifen der Versandtasche ab und kleben Sie diese zu. **Achtung! Die Versandtasche lässt sich danach nicht mehr öffnen.** Senden Sie diese umgehend an unser Labor zurück.



Senden Sie nur vollzählige Probengefäße an das Labor. Beachten Sie die ggf. geforderte Mindestmenge an Probenmaterial, da eine Laboranalyse sonst nicht möglich ist.

* Füllen Sie den Probenbegleitschein komplett aus, wenn Sie den Test nicht online aktiviert haben. Beachten Sie bitte, dass in diesem Fall die Bereitstellung der Ergebnisse 1-2 Tage länger dauern kann.



Mit dem Scannen dieses QR-Codes erhalten Sie Zugang zu den Gebrauchsanweisungen der Komponenten der einzelnen Hersteller.

www.medivere.de/gebrauchsanweisungen

Hinweise zur Befundabfrage

Probenbegleitschein: Feld „Einsender-Etikett“

Das Feld „Einsender-Etikett“ wird auf dem Probenbegleitschein nur dann ausgefüllt, wenn Sie durch eine Praxis betreut werden.

Probenbegleitschein / Download Ihres Befunds

Sind auf dem Probenbegleitschein alle persönlichen Daten vollständig eingetragen, wird Ihnen der Befund automatisch per Post zugestellt. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, den Befund vorab über das Internet abzurufen.

Wenn Sie einen anonymen Befund wünschen, tragen Sie bitte im beiliegenden Probenbegleitschein lediglich Ihr Geschlecht und Ihr Geburtsdatum ein. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall keine Zustellung per Post möglich ist. Zum Download Ihres Befundes gehen Sie bitte auf unsere Webseite.

www.medivere.de

Unter dem Link www.medivere.de/befundabfrage geben Sie die Serien- und die Codenummer Ihres Testsets ein. Diese finden Sie auf dem Probenbegleitschein oder auf der Banderole. Anschließend wählen Sie Ihr Geburtsdatum aus und klicken auf „Senden“, um Ihren persönlichen Befund zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass Ihr Befund nur 2 Jahre lang abrufbar ist. Falls Sie Ihren Befund zu einem späteren Zeitpunkt abrufen möchten, setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung.



QR-Code scannen, um direkt zur Befundabfrage geleitet zu werden.



Befundabfrage

Geburtsdatum

Symbole und Beschreibungen auf der Etikettierung



Hersteller / Zusammensteller

REF

Referenznummer

LOT

Chargennummer



Temperaturbereich

QTY

Mengenangabe der Verpackungseinheit

Garantie

Ihre Zufriedenheit mit unserem Produkt liegt uns sehr am Herzen. Sollte Ihr Testpaket nicht vollständig oder fehlerhaft gepackt sein oder Ihnen ist bei der Probenahme ein Fehler unterlaufen, kontaktieren Sie uns bitte unter:

+49 6131 7205-216 oder **reklamation@medivere.de**

Halten Sie bitte Ihren Probenbegleitschein bereit und entsorgen Sie diesen nicht. Die darauf stehende Serien- und Codenummer wird benötigt, um Ihnen neues, kostenfreies Probenmaterial zu senden.



medivere GmbH
Hans-Böckler-Str. 109
55128 Mainz

WAS WIRD GETESTET?

Orientierende Trinkwasseranalyse auf Schwermetalle und Leichtmetalle sowie Bestimmung der Parameter Nitrit, Nitrat, Phosphor, Sulfat sowie der Wasserhärte

PROBENNAHME

 **WASSER**

Indikationen: Magen-Darm-Probleme, Kreislaufbeschwerden, Kopfschmerzen



medivere GmbH
Hans-Böckler-Straße 109
55128 Mainz
www.medivere.de

REF

140002DE

LOT

QTY 1

